


Score sur l'Echelle de Braden

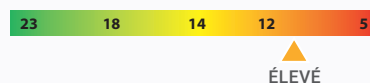

**ALOVA**  
100

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**.  
Patient alité de 10 à 15 heures par jour.  
Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2**.

**30 ≤ 150kg**



NORMES FEUX  
EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

## LES + PRODUIT

- Largeur 100 cm pour une adaptation sur notre gamme de lit en largeur 100 cm apportant une meilleure qualité de sommeil au patient.
- Mousse viscoélastique haut de gamme pour favoriser l'immersion et le confort du patient.
- Bordures stabilisatrices pour confort et sécurité.

HOUSSE	CARTON INDIVIDUEL	PALETTE BOX (Par 10 unités)
	VMA100-PUHD	VMA100-PUHD-BOX
	VMA100-CIC	VMA100-CIC-BOX

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas monobloc moulé monoportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse HR de 8 cm
- ▶ Couche supérieure en mousse viscoélastique  $\geq 75$  Kg/m<sup>3</sup> pour augmenter la zone en contact avec le support afin d'assurer une diminution des pressions maximum pour une prévention optimale du risque d'escarre
- ▶ Base en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) : densité 34 Kg/m<sup>3</sup> pour apporter un bon maintien et assurer une bonne durée de vie du produit
- ▶ Housse Promust CIC amovibles et lavables en machine

