

plus EFICAZ

- + Peso paciente de 30 a 165 kg
- + Cálculo automático y continuo de la presión de inflado
- + Gestión de la posición sentado
- + Descarga de talón de serie

plus CÓMODO

- + Ajuste confort en todos los modos y en todas las posiciones del paciente
- + Varios anchos disponibles

plus FÁCIL DE USAR

- + El compresor cuenta con una interfaz intuitiva
- + Código QR, para un acceso fácil y rápido a la información del producto
- + Manual de instrucciones simplificado en el compresor

plus DE SEGURIDAD

- + Bloqueo automático de los botones
- + Alarmas visuales y sonoras
- + Guía para cables (opcional)

plus ECOLÓGICA

- + Diseñado y fabricado en Francia
- + Basado en fundamentos de ecodiseño

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REFERENCIA	MEDIDAS	PESO PACIENTE	NORMAS FUEGO
axtair automorpho[®] plus (compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 90 cm	VAXT4/AUTO-P	195 x 87x17 cm		
axtair automorpho[®] plus (compresor + colchón) Funda integral de Promust PU CIC Para camas de 90 cm	VAXT4/CIC-P		30 a 165 Kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 Clase D
axtair automorpho[®] plus (compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 100 cm	VAXT4/AUTO100-P	195 x 97x17 cm		
axtair automorpho[®] plus (compresor + colchón) Funda integral de Promust PU CIC Para camas de 100 cm	VAXT4/CIC100-P			

Mantenimiento de las fundas Promust PU HD y Promust CIC



2 años de garantía

* Comportamiento del compresor a la desinfección con una solución de cloro activo al 1% (10.000 ppm), en uso discontinuo



Este documento está destinado a los proveedores de servicios y distribuidores de material médico y a los profesionales del sector sanitario.

ASKLÉSANTÉ
by WINNCARE

SERVICIO COMERCIAL
+ 34 96 156 55 21

Web : www.winnicare.es


Fabricante
ASKLÉSANTÉ
GRUPO WINNCARE

Producto sanitario de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE

NOVEDAD

axtair automorpho[®] plus

**TERAPIA Y CONFORT
CON TOTAL SIMPLICIDAD**

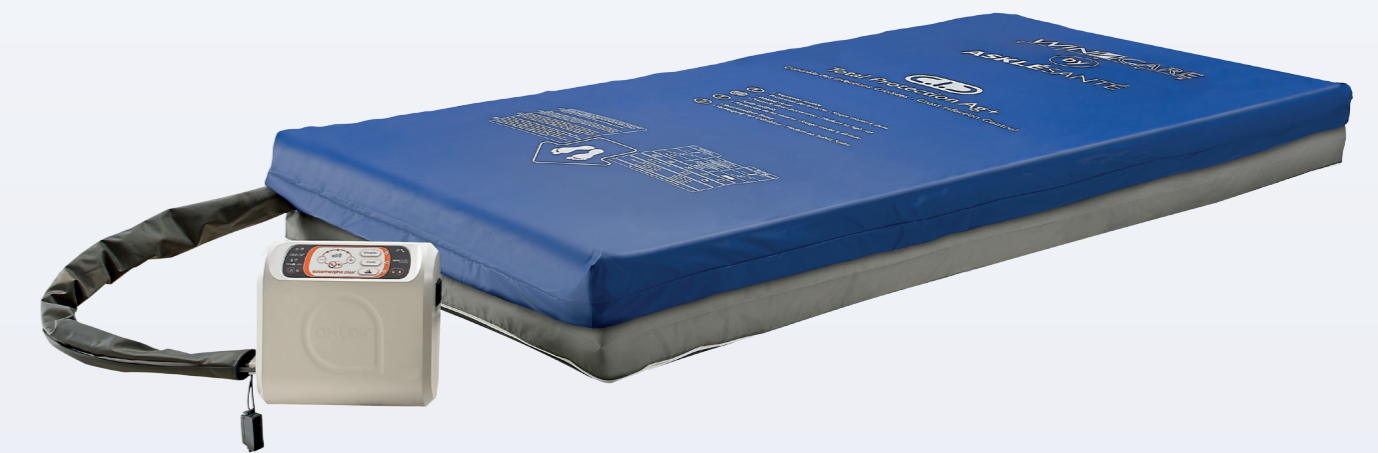

AYUDA EN LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS EN PACIENTES CON RIESGO **MEDIO Y ALTO**

AYUDA EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS EN **4 FASES**

PARA USUARIOS DE HASTA **165 KG**

WINNCARE
g r o u p e

axtar automorpho[®] plus




COMPRESOR

- ▶ Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado en función de la morfología del paciente
- ▶ 3 modos de funcionamiento: dinámico, estático a baja presión, asistencia y cuidados
- ▶ Gestión de la posición sentado
- ▶ Ajuste confort en todos los modos y posiciones del paciente
- ▶ Alarmas visuales y sonoras
- ▶ Número de serie en la parte posterior del compresor, manual de instrucciones simplificado y código QR en los laterales

Código QR para un acceso simple y rápido a la información del producto

- ▶ Referencia del producto y número de serie
- ▶ Ficha del producto, manual de instrucciones, vídeo del producto, preguntas frecuentes, autotest

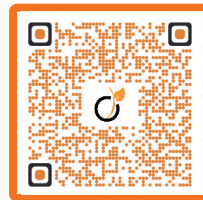


DESCARGA DE TALÓN

- ▶ Permite aliviar la presión en la zona del talón descargando una o varias celdas al pie del colchón



VÁLVULA CPR (CARDIO PULMONARY RESCUE)

- ▶ Apertura y cierre fácil y rápido
 - ▶ Desinflado del colchón en menos de 15 segundos en caso de urgencia*
- * Para un paciente de 80 kg tumbado

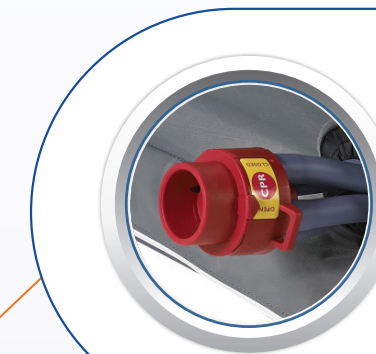

CELDAS

- ▶ 18 celdas de poliuretano con base éter, de 12 cm de altura, aire terapéutico y 300 µ de grosor



COVER

- ▶ Cara superior: bielástica, impermeable a los líquidos y permeable al vapor de agua
- ▶ Cara inferior: base antideslizante
- ▶ 2 fundas disponibles:
PROMUST PU HD (funda negra)
PROMUST CIC (funda azul) con tratamiento antibacteriano con iones de plata



TAPÓN DE TRANSPORTE

- ▶ Permite bloquear las dos vías en modo transporte con una autonomía de 8 horas.



Bombas de inflado y desinflado rápidos para instalar y retirar el colchón fácilmente



Se entrega en bolsa de transporte