



C4300 CHARIOT DOUCHE

Le chariot douche est utilisé pour le transfert du lit à la douche. La personne est transférée sur le chariot douche facilement et confortablement.

 ≤ 155 kg



Entretien 

TRANSFERT

- Le transfert du patient est facilité grâce à la position basse de 52 cm.
- En approchant le chariot douche près du lit, le transfert peut être réalisé par une seule personne.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Hauteur variable de 52 à 88 cm hydraulique actionnable par pédale bilatérale
- ▶ Polyester PVC Bleu molletonné, 2 cm d'épaisseur, fixé sur un plateau en Compact hydrofuge
- ▶ Barres de poussée tête et pieds
- ▶ Plan de couchage : 1,78 m x 60 cm
- ▶ Capot de protection de la base en ABS
- ▶ Large piétement de 71,5 cm pour une meilleure stabilité
- ▶ Bonde d'évacuation obturable. Tuyau d'évacuation clipsable

LES + PRODUIT

CONFORT

La hauteur variable permet au personnel soignant de travailler dans une position idéale, évitant les risques de lombalgies.

SÉCURITÉ

Les barrières latérales de protection d'une hauteur de 20 cm garantissent la parfaite sécurité du patient.

ROBUSTE

Structure en acier métal peint anticorrosion



Bonde d'évacuation simple d'utilisation.
Plan incliné à 2°



Freinage centralisé en option avec 4 roues Ø 125 mm, dont 1 directionnelle.


COUSSIN CYLINDRIQUE

Hauteur 9,90 cm, longueur 49,7 cm, largeur 20,2 cm



BARRIÈRES

Barrières profilées escamotables, métal peint

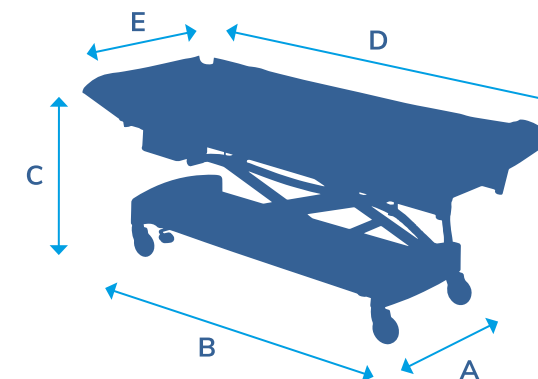

A	B	C	D	E	ROUES	POIDS DU CHARIOT
LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR UTILE	HAUTEUR VARIABLE	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR UTILE		
74 cm	178 cm	52 à 88 cm	198 cm	60 cm	150 mm	79 kg