


À commander
sur le site (30)
Nîmes



Score sur l'Échelle de Braden

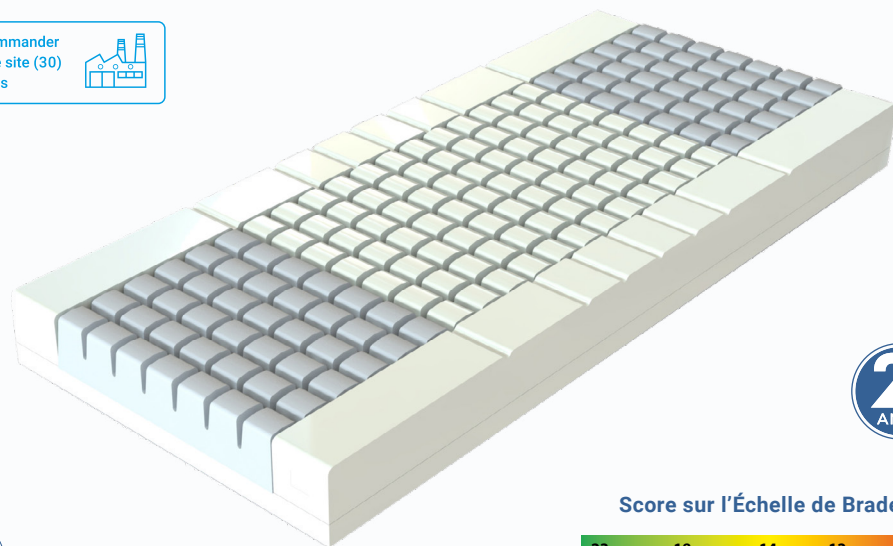

ÉLEVÉ



EPSUS

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**.
Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 120kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



227,40€ avec PLV
- CODE 1273065 -

LES + PRODUIT

- Matelas multiportance pour une immersion adaptée aux différentes zones anatomiques à risque.
- La souplesse des plots pour une réduction des effets de cisaillement et une aération du support et réduction des effets de sudation.
- Bordures stabilisatrices pour confort et sécurité. Compatible avec l'usage d'une planche de transfert "lit - fauteuil roulant".

HOUSSE	CARTON INDIVIDUEL
	VE208MB
	VE208MB/HIPH

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) composé de **8 modules amovibles** de différentes portances
- ▶ La multiportance permet d'assurer une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée
- ▶ Bordures stabilisatrices pour faciliter le redressement « allongé-assis » et les transferts « lit-fauteuil »
- ▶ Densité ≥ 34 Kg/m³
- ▶ Portance : 2,5 kPa (modules bleus), 2,9 kPa (modules blancs), 3,5 kPa (bordures stabilisatrices)
- ▶ Poids matelas : ~ 16,4 kg
- ▶ Dimension du matelas : 90 x 195 cm, hauteur : 17 cm
- ▶ Dimension du couchage : 200 cm x 90 cm
- ▶ Alèse Dermalon et housse PROMUST PU HD amovibles et lavables en machine