

# COJINES GEL Y ESPUMA GELSCAR GELTOP



COJINES COMPUESTOS DE GEL VISCOELÁSTICO ASOCIADO O NO A UNA BASE DE ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA

- **Eficacia:** disminución de las fuerzas de cizallamiento aplicadas a la piel gracias a las propiedades del gel viscofluido.
- **Seguridad:** principio de estabilización del cojín.



Cojín Geltop




Cojín Gelscar

## COJÍN GELSCAR

- Disminución de las fuerzas de cizallamiento aplicadas a la piel gracias a las propiedades del gel viscofluido.
- Reducción de las presiones máximas.
- Seguridad del asiento asegurada por los 4 cordones cosidos a las 4 esquinas.
- Isotermia gracias a las propiedades del soporte de neopreno celular.
- El gel puede proporcionar una sensación de frescor al primer contacto: el soporte de neopreno permite atenuarla.



Espesor 35mm.

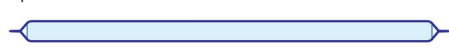

## COJÍN GELTOP




Disponible con dos fundas.



- Reducción de las presiones máximas por inmersión del cuerpo en un gel fluido contenido en un soporte de espuma de alta resiliencia.
- Disminución de las fuerzas de cizallamiento aplicadas a la piel gracias a las propiedades del gel viscofluido.
- Termorregulación mediante permeabilidad de la protección al vapor de agua.

Gel fluido espesor: 10 mm

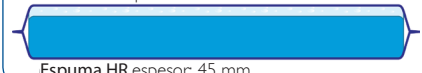

Espuma HR espesor: 45 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
<b>GELSCAR para asiento de silla o sillón de 38/42cm de ancho y 39/42cm de profundidad.</b>	VGLS01C	40 x 40 x 3,5	40 a 100 kg	EN 591-1 y 2
<b>GELSCAR PERFORADO para asiento de 38/42cm de ancho y 39/42cm de profundidad.</b>	VGLS03C	40 x 40		
<b>GELSCAR para asiento de silla o sillón de 40/45 cm de ancho y 44/47cm de profundidad.</b>	VGLS01C/4345	43 x 45 x 3,5		
<b>GELTOP para asiento de silla o sillón de 40/42cm de ancho y 40/42cm de profundidad, funda Techmapolar.</b>	VAB40	40 x 40 x 5,5	30 a 95 kg	
<b>GELTOP para asiento de silla o sillón de 43/45cm de ancho y 43/47cm de profundidad, funda Techmapolar.</b>	VAB4345	43 x 45 x 5,5		

Mantenimiento: Fundas



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

2 años de garantía.

Fabricado por

**ASKLÉSANTÉ**  
WINNCARE

