


ALMOFADAS **SIGEL**[®] DE FLUTUAÇÃO LÍQUIDA

- Previne o aparecimento de úlceras.
- Gera conforto: ajuda a manter a postura e absorve os impactos.
- Proporciona sensação de frescor nas zonas de contacto.



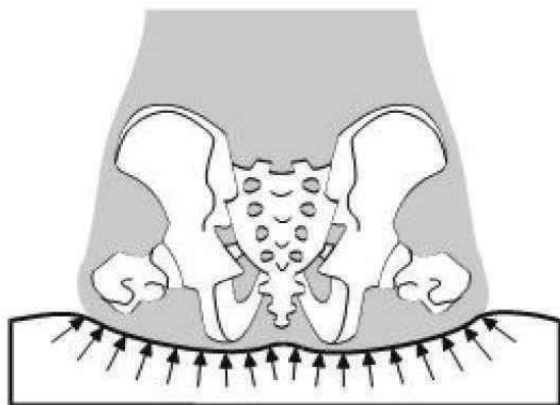

Para obter uma adequada distribuição das pressões, a almofada dispõe de um sistema de flutuação que aumenta a superfície de contacto com o utilizador. Desta forma, obtém-se uma redução da pressão por unidade de superfície, evitando assim a compressão prolongada dos vasos sanguíneos situados ao redor das proeminências ósseas e permitindo uma melhor irrigação sanguínea dos tecidos.

Para uma **maior prevenção e conforto** a espuma HR com densidade de 34 kg/m³ é combinada com um fluido.

Envoltório com a parte inferior realizada em tecido antideslizante que aumenta a segurança. Parte superior com tratamento retardante contra o fogo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR	NORMAS
SIGEL® Quadrado	I02901001	42× 42×6 cm	120 kg	UNE-EN 12182
	I02902001	42×42×4,5 cm	100 kg	
	I02903001	41×41×3,5 cm	80 kg	
SIGEL® Ferradura	I02901002	42× 42×6 cm	120 kg	
	I02902002	42×42×4,5 cm	100 kg	
	I02903002	41×41×3,5 cm	80 kg	

1 ano de Garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es

Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

